
8001552 - 8001733 - Kate - Katy.qxp_Layout 2 24/08/16 11:51 Page 2

## Taboret Kate - Katy

1. Ustaw taboret (A) do góry nogami na stole roboczym.

2. Załóż oparcie (B), wsuwając je do cylindrycznych zawiasów pod siedziskiem i zabezpiecz odpowiednimi przyciskami zatrzaskowymi.

UWAGA: oparcie można montować z dwóch stron w zależności od tego, z której strony chcemy podłokietnik.

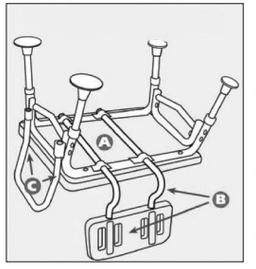


3. Zamontuj podłokietniki wsuwając je w odpowiednie gniazda z boku taboretu i zabezpiecz przyciskami zatrzaskowymi.


Aby ustawić odpowiednią długość nóg należy nacisnąć przycisk zatrzaskowy i wysunąć ruchomą część do odpowiedniej długości. **Przed używaniem upewnij się, że przycisk wskoczył z powrotem prawidłowo w otwór!!! Należy powtórzyć czynność przy każdej nóżce**.

Uwaga: Upewnij się, że taboret stoi zawsze na równej powierzchni. Przed użyciem na gładkiej powierzchni sprawdź, czy wszystkie przyssawki ściśle przylegają do powierzchni, a wszystkie cztery nogi są tej samej długości.

**Model KATY: Wsuń pojemnik toaletowy w uchwyt od przodu taboretu. Upewnij się, że pojemnik jest poprawnie osadzony w uchwycie przed siadaniem.**

Do czyszczenia pojemnika toaletowego należy używać ogólnodostępnych domowych środków czyszczących. Nie używać żrących środków czyszczących, które mogą spowodować odbarwienia.

Waga użytkownika : 150 kg

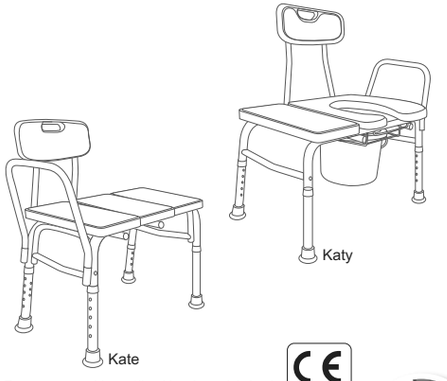


Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów. © 2016

**VERMEIREN**
Tworzymy nowe mo liwo ci

**VERMEIREN**

**België**
N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

**Deutschland**
Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a - D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de - e-mail: info@vermeiren.de

**France**
Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d´Ennevelin - F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98 - Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr - e-mail: info@vermeiren.fr

**Österreich**
Vermeiren Austria GmbH
Schärdinger Straße 4 - A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229/64900 - Fax: +43(0)7229/64900-90
website: www.vermeiren.at - e-mail: info@vermeiren.at

**Italia**
Vermeiren Italia S.R.L.
Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese (MI)
Tel: +39 02/997707 - Fax: +39 02/93585617
website: www.vermeiren.it - e-mail: info@vermeiren.it

**Schweiz**
Vermeiren Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62 - CH-3645 Gwatt (Thun)
Tel: +41(0)33 335 14 75 - Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch - e-mail: info@vermeiren.ch

**Polska**
Vermeiren Polska Sp. z o.o
ul. Łączna 1 - PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00 - Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl - e-mail: info@vermeiren.pl

**Nederland**
Vermeiren Nederland B.V.
Correspondentieadres: Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

**España**
Vermeiren Iberica, S.L.
Carretera de Cartellà, Km. 0,5 - Sant Gregori P.I. - Edifici A
ES-17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 428 433 - Fax: +34 972 405 054
website: www.vermeiren.es - e-mail: info@vermeiren.es

**Česká republika**
Vermeiren ČR S.R.O.
Nadrazni 132 - 702 00 Ostrava
Tel: +420 596 133 923 - Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz - e-mail: info@vermeiren.cz

**Manufacturer**
Vermeiren Group
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

**VERMEIREN**
Opening up new horizons in mobility