Krótka instrukcja obsługi

IMM1046_SI.VER14.2023-01-24




Podukt nu.	Nazwa	Rozmiar (mm)	Min. - max. (mm)	Kolor
IM8009009	SupportBelt XXS	Szer.90xDł.900	450-900	Liliowy
IM8010509	SupportBelt XS	Szer.90xDł.1050	650-1050	Biały
IM8010513	SupportBelt S	Szer.130xDł.1050	650-1050	Czerwony
IM8013013	SupportBelt M	Szer.130xDł.1300	900-1300	Żółty
IM8015013	SupportBelt L	Szer.130xDł.1500	1200-1500	Zielony
IM8017015	SupportBelt XL	Szer.150xDł.1700	1300-1700	Niebieski

SupportBelt

immedia by Etac

immedia
by Etac

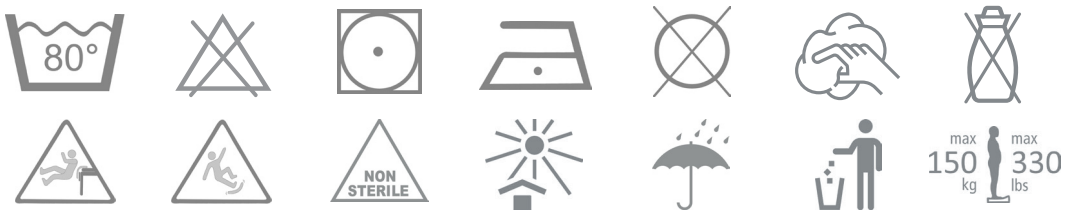

GB:

Material:
Outer material: Polyurethane-coated nylon, water-resistant
Inner surface: Polyester, polyurethane
Filling: Polyethylene padding
Handles: Polyester tubes with polypropylene padding
Buckle: Polyoxymethylene (POM).

Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.

Washing instructions:
Do not add fabric conditioner.
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

SV:

Material:
Yttermaterial: Polyuretanklädd nylon, vattenavvisande
Insidan: Polyester, polyuretan
Stoppning: Polyuretanstoppning
Handtag: Polyesterband med polypropenstoppning
Spänne: Polyoximetylen (POM).

Försök aldrig reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.

Tvättinstruktioner:
Använd inte sköljmedel.
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättsprit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:
Ytre materiale: Polyuretandekt nylon, vannavstøtende
Indre overflate: Polyester, polyuretan
Fyll: Polyetenfôr
Håndtak: Polyestertape med polypropenfôring
Spenne: Polyoksymetylen (POM).

Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.

Vaskeinstruks:
Ikke bruk tøymykner.
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask.Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:
Ydermateriale: Polyurethanbelagt nylon, vandafvisende
Inderside: Polyester, polyurethan
Indermateriale: Vattering af polyethylen
Håndtag: Polyesterbånd fyldt med polypropylen
Spænde: Polyoxymethylen (POM).

Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.

Vaskeinstruktion:
Anvend ikke skyllemiddel.
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug.
Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.


FI:

Materiaali:
Ulkomateriaali: Polyuretaanipinnoitettu nailon
Sisäpinta: Polyesteri, polyuretaani
Pehmuste: Polyeteeni
Nostolenkit: Polyesterihihna, jossa on polypropeenipehmuste
Solki: Polyoksimetyleeni (POM).

Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Älä koskaan käytä viallista tuotetta.

Pesuohjeet:
Älä käytä huuhteluainetta.
Tuote voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla pesuaineella, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

Tuote on tarkastettava säännöllisesti, mieluiten jokaisella käyttökerralla ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, että saumoissa ja kankaassa ei näy vaurioita.

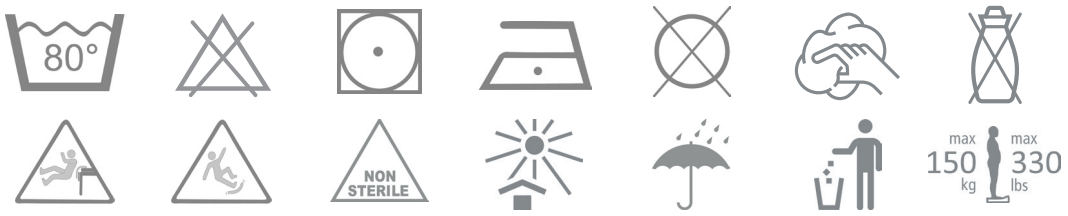

DE:

Material:
Obermaterial: Polyurethan-beschichtetes Nylon, wasserabweisend
Innenfläche: Polyester, Polyurethan
Füllung: Polyethylen-Polsterung
Griffschlaufen: Polyesterband mit Polypropylen-Polsterung
Schnalle: Polyoxymethylen (POM).

Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.

Waschanleitung:
Keinen Weichspüler verwenden.
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Materiaal:
Materiaal buitenzijde: Nylon met polyurethaancoating
Binnenoppervlak: Polyester, polyurethaan
Vulling: Polyetheenvulling
Handvatten: Polyesterbanden met polypropeenvulling
Gesp: Polyoxymethyleen (POM).

Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik een product nooit als het defect is.

Wasinstructies:
Gebruik geen wasverzachter.
Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

FR:

Matériaux :
Matériau extérieur : Nylon enduit de polyuréthane, résistant à l'eau
Surface intérieure : Polyester, polyurethane
Rembourrage : Polyéthylène
Poignées : Bandes de polyester avec rembourrage en polypropylène
Boucle : Polyoxyméthylène (POM).

N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.

Instructions de lavage :
N'utilisez pas d'adoucissant.
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:
Materiale esterno: Nylon rivestito di poliuretano
Superficie interna: Poliestere, polyurethanica
Imbottitura: Polietilene
Impugnature: Nastri in poliestere con imbottitura in polipropilene
Fibbia: Poliossimetilene (POM).

Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.

Istruzioni di lavaggio:
Non usare ammorbidente.
Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

PL:


Materiał
Materiał zewnętrzny: Nylon z powłoką poliuretanową, wodoodporny.
Powierzchnia wewnętrzna: Poliester, poliuretan.
Wypełnienie: Pikowany polietylen.
Rączki: Paski z poliestru z pikowanym polipropylenem.
Klamra: Polioksymetylen (POM).

Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
Nigdy nie używaj wadliwego produktu.

Instrukcje dotyczące czyszczenia:
Nie używać płynów zmiękczających.
Produkt można czyścić za pomocą środka czyszczącego bez rozpuszczalników o pH między 5-9 lub roztworu dezynfekującego o stężeniu 70%.

Produkt powinien być regularnie sprawdzany, najlepiej za każdym razem po użyciu, a zwłaszcza po umyciu. Upewnij się, że szwy lub materiał nie są uszkodzone.


Ilustracje

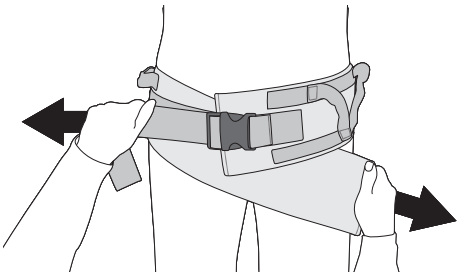


1



2

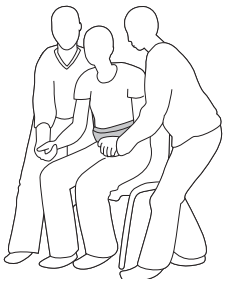

3

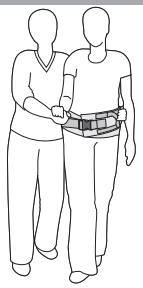

4

Check



Etac Immedia A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

UK responsible person:
Etac Ltd, Unit 60
Hartlebury Trading Estate
Hartlebury Kidderminster DY10 4JD

SupportBelt

etac®
Creating Possibilities