

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

F35 - TWÓJ STYL ŻYCIA W NOWEJ ODSŁONIE

ZMĘCZONA/-Y NIEPORĘCZNYMI URZĄDZENIA?

My również. Porozmawiajmy naprawdę: Każde małe pchnięcie do przodu może nie wydawać się wielką sprawą, ale dzień po dniu obciążenie ramion kumuluje się z czasem.

Elektryczne urządzenia wspomagające mogą być superbohaterami świata mobilności, ale niektóre z nich są po prostu zbyt nieporęczne i ciężkie do codziennego użytku - szczególnie podczas szybkich wypadów po mieście lub w podróży.

Empulse F35 to idealne połączenie stylu i praktyczności. To ultraprzenośna przystawka nie tylko wygląda - to bilet do szybkiej i bezwysiłkowej mobilności w miejskiej dżungli.

- Nasze najmniejsza i najlżejsze przystawka
- Mieści się do małych samochodów i przestrzeni
- Najmniejszy promień skrętu i zasięg do 15 km ukryte w kompaktowej ramie
- 2 sposoby dokowania, aby wejść, wyjść, dostać się gdziekolwiek
- Pasuje do większości wózków na ramie sztywnej i składanej
- Przyjazna w podróży bateria, idealna do podróży samolotem,



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

MOCOWANIE



Idealny do częstych postojów: **Odłącz F35 od ramy pomocniczej w kilka sekund.**

DWA SPOSOBY DOKOWANIA - WYBIERZ SPOSÓB, KTÓREGO POTRZEBUJESZ

1 “Najszybszy”: **Zgłoszone do opatentowania, łatwe dokowanie jednym ruchem dla szybkich postojów w mieście. Łatwo wyjmij główną rurę z odbiornika, zachowując ramę pomocniczą przymocowaną do wózka. Idealny na przerwy, gdy wsparcie F35 nie jest wymagane, takie jak wyjście do kawiarni lub przebywanie na uczelni lub w biurze. A co najlepsze? Można ją ponownie zamocować w kilka sekund, gdy potrzebne jest dodatkowe wsparcie.**

Składane i blokowane uchwyty: **Koniec siłowania się z nieporęcznym sprzętem! Wygodnie mieści się w najmniejszym bagażniku samochodowym lub na tylnym siedzeniu, umożliwiając płynne i niezależne wkładanie do auta.**



Zeskanuj kod QR, aby aby zobaczyć, jak przymocować F35 do wózka

2

2 “Do przechowywania”: **kiedy nadejdzie czas na przesiadkę z wózka do samochodu, kanapę lub łóżko, opcja łatwego odczepienia całego urządzenia z wózka. Wystarczy zdjąć główną rurę i ramę pomocniczą z wózka za pomocą łatwych w użyciu zacisków, zapewniając idealne rozwiązanie do przechowywania F35.**











Możliwość rozłożenia na dwie lżejsze części w celu ułatwienia załadunku (ramę pomocniczą i F35 można rozdzielić).

LEKKI I KOMPAKTOWY DLA NIEZALEŻNEGO PRZESIADANIA DO AUTA

Lekki jak piórko: **Niezależnie od tego, czy jedziesz sam, czy z pomocą, F35 oferuje super lekką wagę transportową wynoszącą zaledwie 7,5 kg (bez ramy pomocniczej), dzięki czemu wkładanie do samochodu jest dziecinnie proste i promuje niezależność podczas codziennych przygód.**

Inteligentna kompaktowa konstrukcja: **Elegancki i kompaktowy profil dzięki naszej konstrukcji typu “wszystko w jednym”, zapewniającej łatwą obsługę i transport bez zbędnych kilogramów.**

.

CECHY SZCZEGÓŁOWE


Pryjazny do latania akumulator 4Ah - **kompaktowy, a jednocześnie wydajny i dokładnie taki, jaki potrzebujesz do jazdy po mieście i podróży (należy wcześniej sprawdzić z przewoźnikiem lotniczym, aby uzyskać szczegółowe wymagania dotyczące akumulatora).**

Inteligentny system zarządzania akumulatorem - **System i innowacyjne ogniwa 21700 oznaczają maksymalne wykorzystanie z każdego ładowania. Inteligentny i sprytny, tak jak Ty.**

Ultrakompaktowy promień skrętu: **będąc w tłumie, korzystając z windy - obracaj się jak profesjonalista z ultrakompaktowym promieniem skrętu.**



Dzięki zasięgowi do 15 km, **masz swobodę eksplorowania daleko i szeroko**

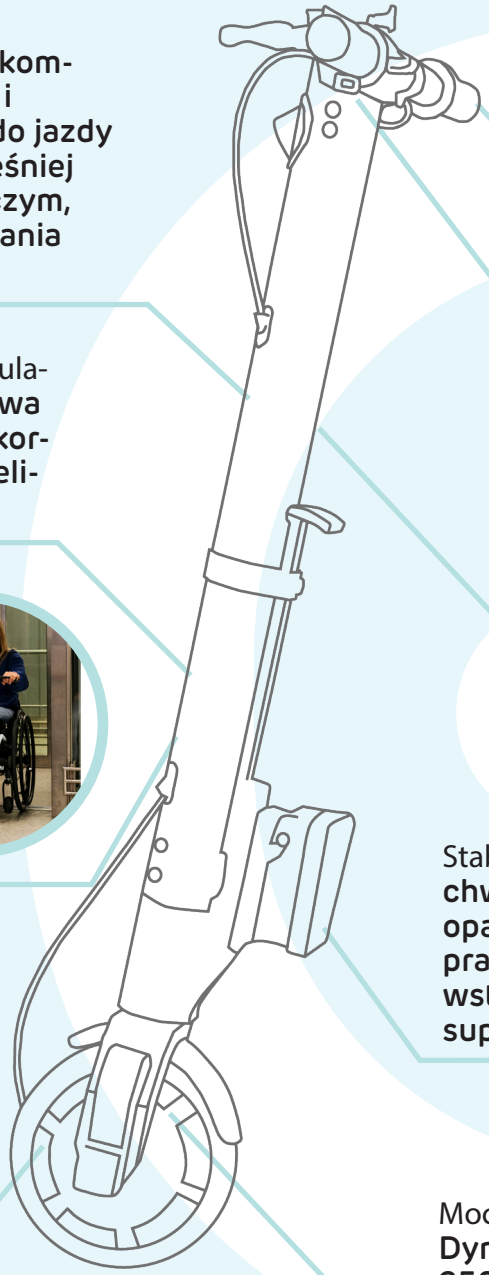

Wydajny układ hamulcowy: **Korzystaj z podwójnego układu hamulcowego - proporcjonalnego elektroniczny i niezawodnego hamulca bębnowego - oraz hamuleca postojowego zapewniającego precyzyjną kontrolę i bezpieczeństwo podczas podróży.**



Tempomat: **utrzymuje stałą prędkość pod górę i z góry.**



Pokonuj pochyłości: **Parkingi, rampy, transport publiczny, chodniki - pokonaj te uciążliwe codzienne przeszkody z pewnością siebie! F35 może pokonywać wzniesienia o nachyleniu 6 stopni, nawet przy maksymalnej wadze użytkownika wynoszącej 110 kg.**

Stabilność następnego poziomu: **Pożegnaj się z chwiejnymi jazdami! Dzięki zgłoszonemu do opatentowania mechanizm blokujący, F35 jest praktycznie przyklejony do ramy. Żadnych wstrząsów, żadnego grzechotania - po prostu super mocna, super stabilna jazda.**



Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym: **Dynamiczna jazda dzięki silnikowi o mocy 250 W zapewnia płynną i responsywną podróż.**





Dostępne 3 opcje prędkosci maksymalnej: **Wybierz swoje tempo wolne 6 km/h, umiarkowane 10 km/h, czy szybkie 15 km/h.**



Brak uślizgu kół:
3 tryby przyspieszenia (Wolny, Standardowy, Szybki) dostosowują moc do każdej powierzchni.



Port ładowania USB **umożliwia ładowanie telefonu, dzięki czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie baterii podczas korzystania z nawigacji lub słuchania muzyki.**

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć filmy serwisowy!



Oświetlenie LED: **Światło LED płynnie wtapia się w konstrukcję F35 zapewniając wygodny sposób na oświetlenie ścieżki i poprawę widoczności.**

OŚWIETLENIE LED



DANE TECHNICZNE

Maks. waga użytkownika	110 kg / 242 lbs
Maks. wymiary	915 mm x 584 mm x 610 mm / 36 x 22.9 x 24" (wys. x szer. x głęb.)
Zasieg*	do 15 km / 9.3 mi
Kąt podjazdu	do 11% (6°)
Waga	
z akumulatorem i ramą pomocniczą	od 9 kg / 19.8 lbs
waga transportowa	od 7.5 kg / 16.5 lbs
Szerokośc ramy	260 – 480 mm / 10.2 - 18.9" (1)
Kolor	czarny
Maksymalna prędkość	6 kph; opcjonalnie 10/15 kph 3.7 mph; opcjonalnie 6.2/9.3 mph (speed can be regulated in 3 levels)
Akumulator	Lithium-Ion 36V 4Ah
Czas ładowania	około 2 h
Rozmiar koła	6,5"
Silnik	250 W
Hamulce	Podwójny układ hamulcowy (mechaniczny hamulec bębnowy i oddzielny proporcjonalny elektroniczny hamulec silnikowy) oraz hamulec postojowy
Gwarancja	zgodnie z lokalnymi przepisami
Zgodność z normami	EN12184

(1) Szerokość ramy mierzona od środka rury ramy do środka rury ramy w pozycji montażowej.

F35 strona www

F35 formularz

FIRMA SUNRISE MEDICAL DBA O BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW.Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania wskazówek i wytycznych dotyczących konserwacji.

** Zasięg zależy od podłoża, wagi użytkownika, sposobu jazdy, temperatury i ukształtowania terenu zgodnie z normą ISO 7176-4.*

DODAJ AKCESORIA!



Uchwyt na telefon: **Uchwyt na smartfon pozwala zachować łączność i kontrolę podczas jazdy.**



Przetwornica samochodowa: **Adapter do ładowania samochodowego zapewnia ładowanie niezależnie od miejsca podróży.**



Zabezpieczenie antykradzieżowe: **Blokada zapewnia, że F35 pozostanie tam, gdzie go zostawiłeś, dając Ci spokój ducha, gdziekolwiek zaparkujesz.park.**

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

SUNRISE MEDICAL 03.2024

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie pytania należy kierować do Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.

www.Sunrise-Medical.pl

Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Empulse