# Krótka instrukcja– PL


## Molift Transfer Pro

molift® by Etac


QG70101 - 2024-02-20 - Rev. 1.0




1. i 01

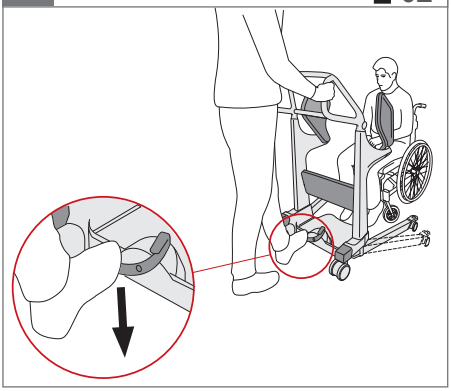


2. i 02

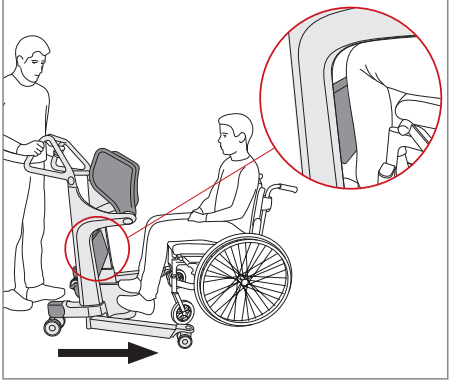


3. ⚠ 01

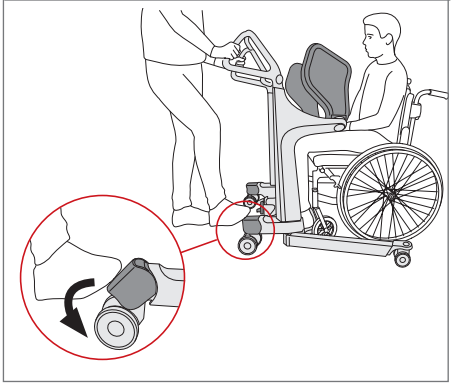


4. ⚠ 02

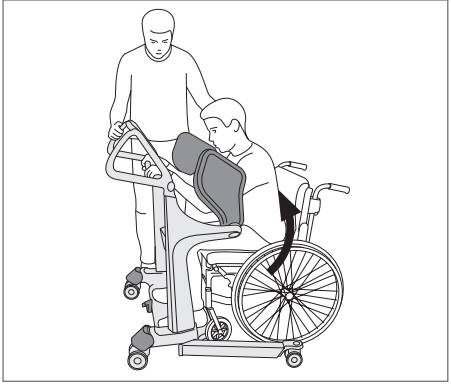


**5.**

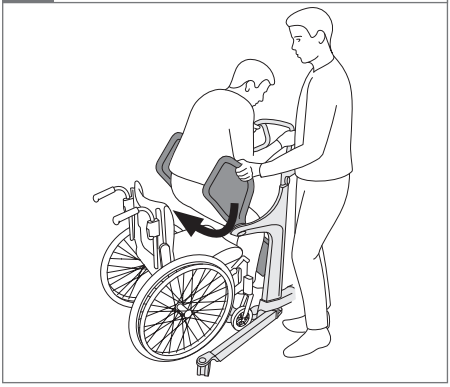


**6.** 03

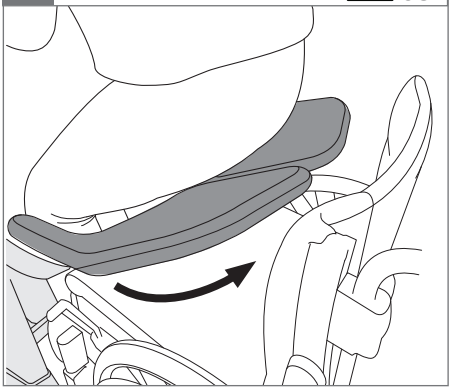

**7.**

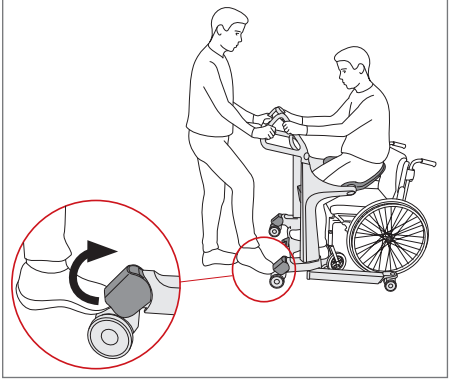


**8.** 03

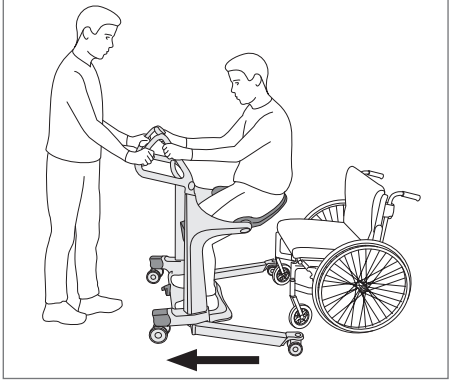





1.

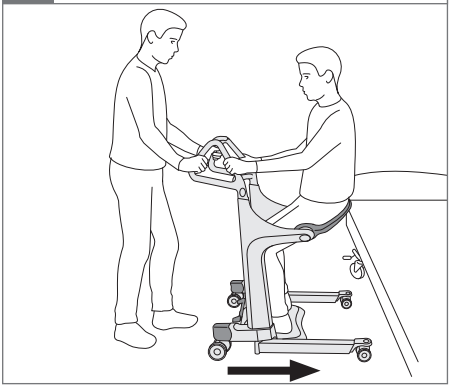


2.

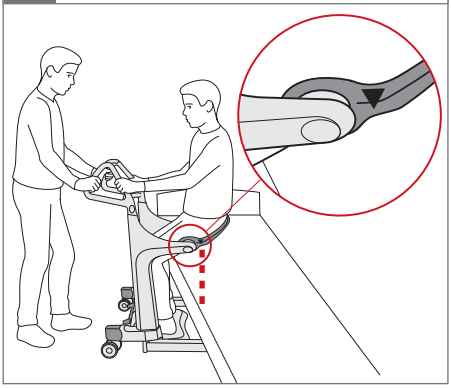



3.

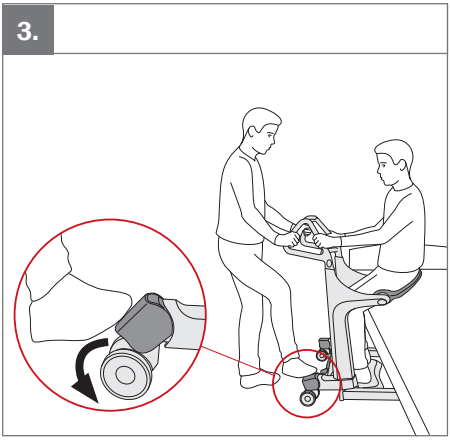


4.

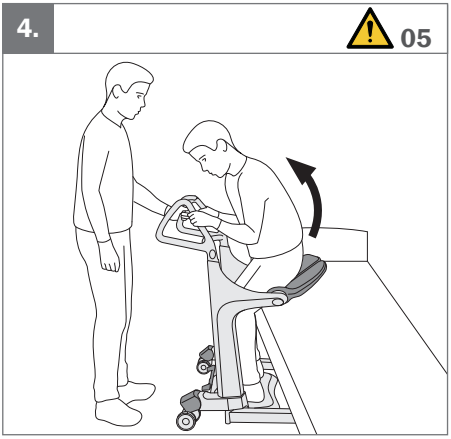



5.

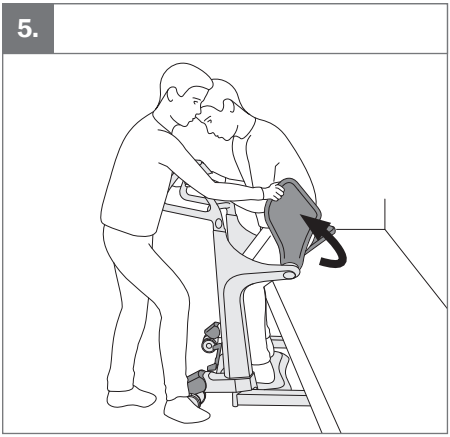


6.

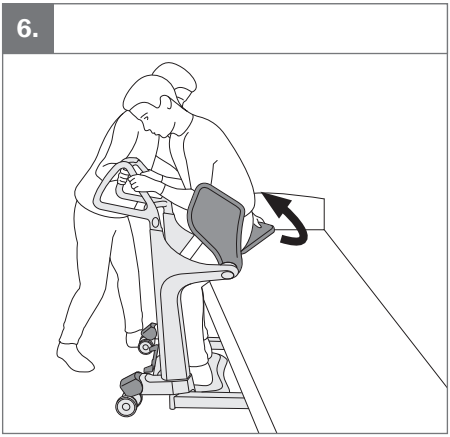


**7.**

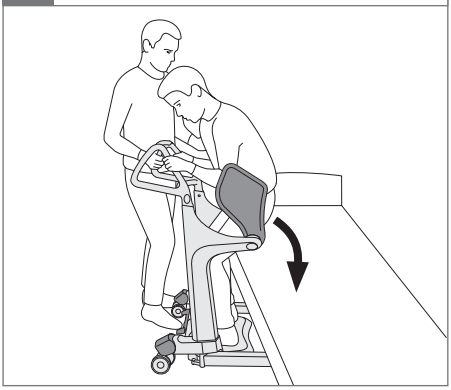

**8.**

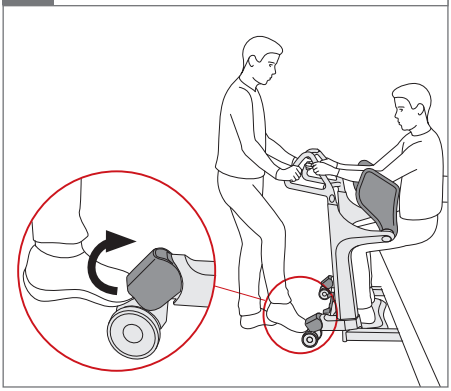

**9.**

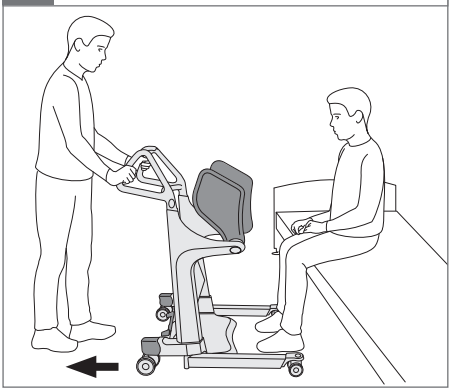

## Obsługa

### Uwagi

1. Koła muszą być zawsze zablokowane, gdy użytkownik przechodzi między pozycją siedzącą a stojącą.
2. Użytkownik powinien zawsze trzymać się uchwytów podczas transferu.
3. Użytkownik musi pozostać stojący do momentu, aż oba podnóżki zostaną obrócone w dół.
4. Upewnij się, że oznaczenie na podnóżku minimalnie jest wyrównane z krawędzią siedziska, zanim użytkownik usiądzie.
5. Zawsze obracaj oba podnóżki w górę przed tym, jak użytkownik usiądzie.

### Informacje

1. Dostosuj regulację nóg za pomocą pedału. Lewa: szersza. Prawa: węższa.
2. Umieść Transfer Pro tak, aby podpora na nogi sięgała goleni użytkownika.
3. Opcjonalnie można przesunąć nogi podczas transferu.

## Dane techniczne

28,2kg
62lbs

max 200 kg
max 440 lbs

200cm
149cm

## Czyszczenie

max
70 °C
10 min

pH min 5 max 9

To jest Szybki Przewodnik. Najnowsza wersja wszystkich instrukcji użytkownika można pobrać jako plik "pdf" ze strony www.etac.com.

**Etac A/S**
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

+45 796 858 33
patienthandling@etac.com
www.etac.com

molift® by Etac