

WAŻNE

DLACZEGO NALEŻY POMPOWAĆ KORZYSTAJĄC Z MANOMETRU?

Niedostateczny poziom napompowania może mieć wpływ na skuteczność działania poduszek powietrzno - komorowych. Przepełniona lub niedopompowana poduszka może być niewydolna. Jako, że różnice w poziomie napompowania wewnątrz komór (rzędu kilku mbar) są niewykrywalne ręcznie, jedynym sposobem na prawidłowe napompowanie poduszki powietrzno - komorowej jest zastosowanie urządzenia do pompowania typu manometr. Tylko manometr uwzględnia wagę i powierzchnię kontaktu ciała każdej z osób z poduszką, dzięki czemu w sposób dokładny i powtarzalny gwarantuje skuteczne zapobieganie odleżynom.

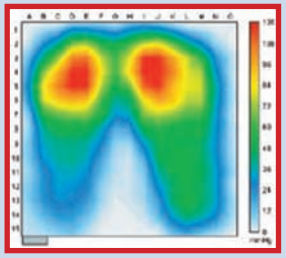

Poduszka napompowana ręcznie (bez użycia manometru)
Czerwone obszary z zaznaczonymi ważnymi punktami podparcia w obszarze krzyżowo-pośladkowym, które mogą sprzyjać pojawianiu się odleżyn.

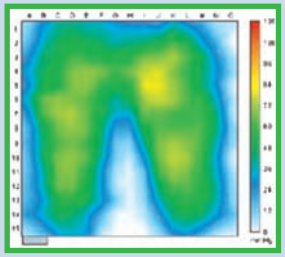

Poduszka napompowana z użyciem manometru.
Odpowiednia równowaga punktów podparcia, zmniejszająca ciśnienie przezskórne w odniesieniu do obszarów ryzyka. Skuteczna profilaktyka.

INNE DANE ZWIĄZANE Z OGÓLNYM UŻYTKOWANIEM MANOMETRU

- Manometr jest przyrządem precyzyjnym, dlatego należy unikać wstrząsów i wymuszonego działania.
- Nie należy naciskać gruszki do pompowania, jeśli przewód jest zaciśnięty lub zagięty, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
- Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby zapewnić normalną pracę urządzenia, diody migają, a następnie manometr wyłącza się. Należy wówczas wymienić baterie (2 baterie x 1,5 V LR03 - AAA).
- Manometr wyłącza się automatycznie po 4 minutach bezczynności.

SYST'AM®

CE

REF **P624B**



PL

Przyrząd do pompowania - Manometr

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Akcesoria do wyrób medyczny klasy 1 zgodnie z MDR (UE) 2017/745.

SYST'AM®

SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS
ZAE - Route de Casseneuil - LE LEDAT
47300 VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE
Tel. commercial : 05 53 40 23 50 - Fax commercial : 05 53 40 50 40
International phone + 33 553 40 50 30 - International fax + 33 553 40 58 38
www.systam.com
Siret : 392 011 920 00015 - APE 331 B - FR 12 392 011 920

© SYST'AM®
07/2022
4731DV2

RYS. 1

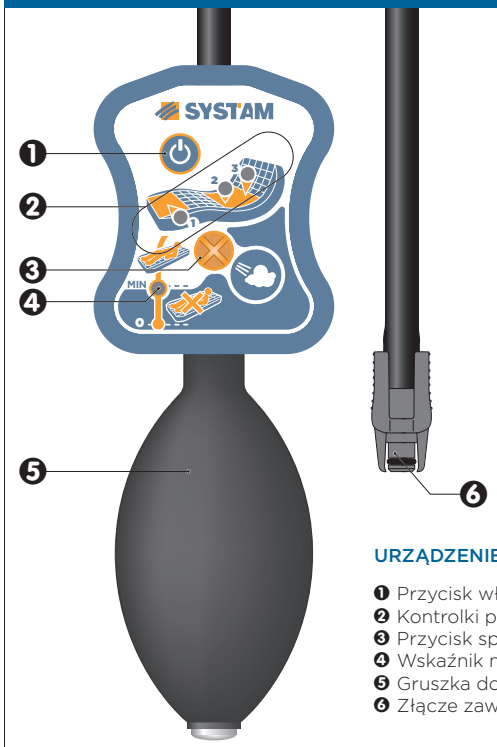


URZĄDZENIE DO POMPOWANIA MANOMETR

❶ Przycisk włączania/wyłączania
❷ Kontrolki poziomu napompowania
❸ Przycisk spuszczania powietrza
❹ Wskaźnik napompowania wstępnego
❺ Gruszka do pompowania
❻ Złącze zaworu poduszki POLYAIR®


1 USTALANIE WARTOŚCI NAPOMPOWANIA

RYS. 2

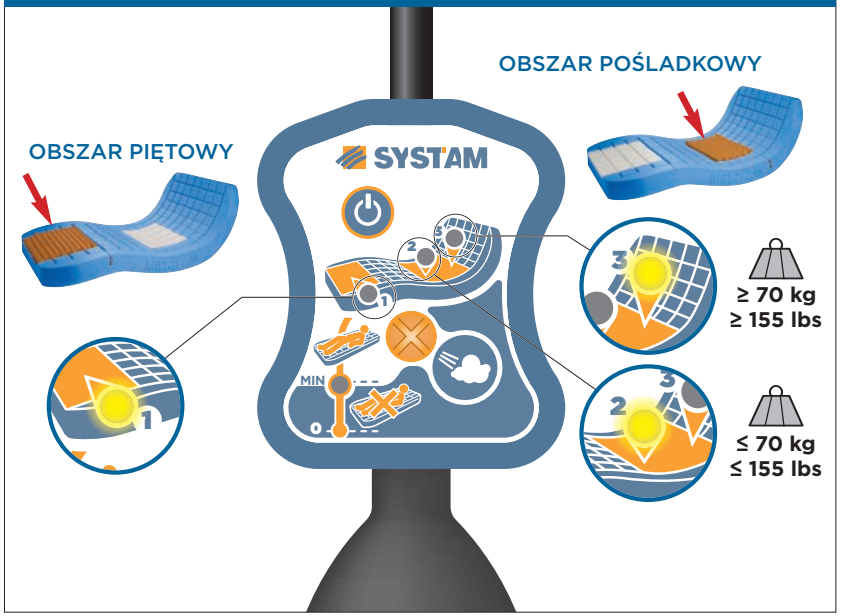

2 POMPOWANIE WSTĘPNE I POMPOWANIE

RYS. 3

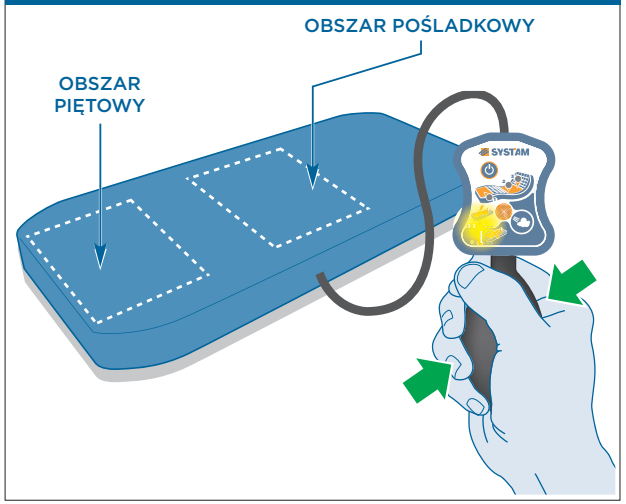

1 - POMPOWANIE WSTĘPNE RYS. 3

Wstępne pompowanie jest niezbędnym etapem w regulowaniu poduszki. Wstępne napompowanie musi być wykonane BEZ pacjenta znajdującego się na poduszce.

Należy włączyć manometr naciskając przycisk włączania/wyłączania ❶ **Rys. 1**. Kontrolka ładowania wstępnego ❹ miga, **Rys. 1**.

Podłączyć manometr do zaworu i wstępnie napompować poduszkę, aż zaświeci się wskaźnik napompowania wstępnego (wskaźnik napompowania wstępnego ❹ **Rys. 1**). Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, należy spuścić powietrze, naciskając przycisk spuszczania powietrza ❸ **Rys. 1**.

2 - UŁOŻENIE PACJENTA NA MATERACU (podczas etapów regulowania)

Aby urządzenie powietrzno-komorowe było właściwie napompowane, należy postępować w następujący sposób:

A Należy ułożyć pacjenta w pozycji całkowicie wyciągniętej na materacu.

B Należy sprawdzić, czy urządzenie powietrzno-komorowe jest prawidłowo umieszczone w stosunku do obszaru kości krzyżowej lub pięty (w zależności od zastosowania).

3 - REGULOWANIE CIŚNIENIA, RYS. 4

Za pomocą manometru należy sprawdzić ciśnienie w urządzeniu i w razie potrzeby ponownie wyregulować ciśnienie, aby uzyskać wartość napompowania wskazaną w tabeli.


Są tutaj możliwe 2 przypadki:

C-1 Odczyt ciśnienia na manometrze jest wyższy od wartości docelowej lub kontrolka 3 miga (wskazując ciśnienie > 3); w tym przypadku należy stopniowo opróżnić poduszkę za pomocą przycisku spuszczania powietrza ❸ **Rys. 1**, nie zapominając o kilkukrotnym podnoszeniu w trakcie tej czynności, aby umożliwić cyrkulację powietrza w poduszce.

C-2 Odczyt ciśnienia na manometrze jest niższy od ustalonej wartości napompowania; w tym przypadku należy pompować stopniowo przy użyciu gruszki do pompowania ❺, **Rys. 1**, nie zapominając przy tym o kilkukrotnym podnoszeniu w trakcie tej czynności, aby umożliwić cyrkulację powietrza w poduszce.

Aby wyłączyć manometr, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania ❶ **Rys. 1**.

RYS. 4

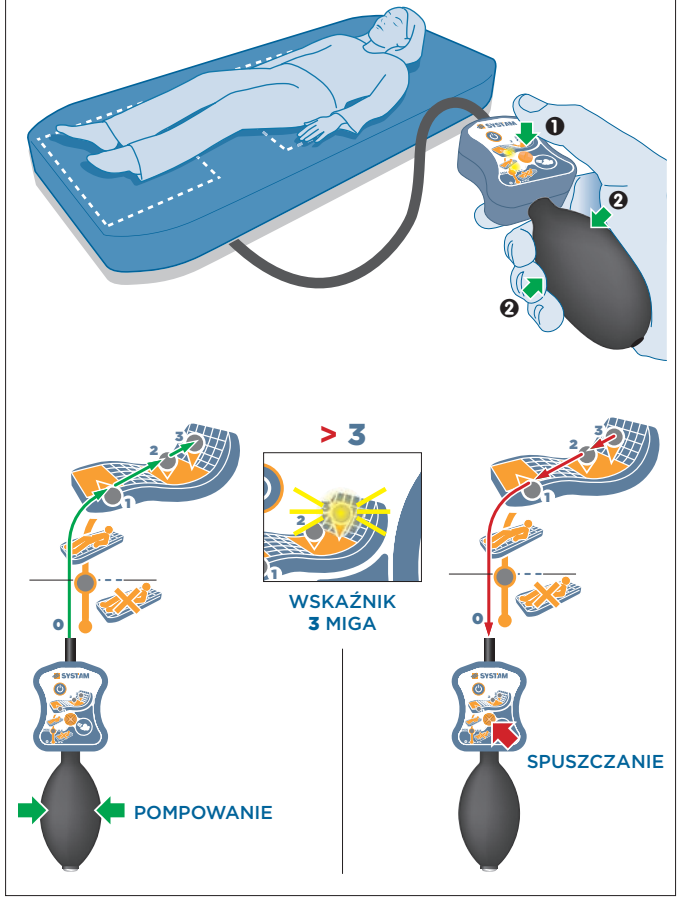

KONTROLA PONOWNEGO NAPOMPOWANIA PODUSZKI

UWAGA. Za każdym razem, gdy poduszka jest poddawana kontroli napompowania lub ponownie pompowana, należy zwrócić uwagę na ułożenie opisane w punkcie 2.

Podobnie jak w przypadku większości nadmuchiwanych przedmiotów, zaleca się okresowe sprawdzanie ciśnienia (średnio co 1 do 2 tygodni).

GWARANCJA

Dwa lata od daty zakupu przez klienta na wszelkie wady fabryczne. W przypadku wystąpienia wady fabrycznej należy skontaktować się ze sprzedawcą, podając numer partii produktu. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania urządzenia.