INSTRUKCJA OBSŁUGI

Orteza stopowo-goleniowa z regulacją kątową

Kod produktu: 12203 / 12205 / 12207

1. Wykonanie

Orteza stopowo-goleniowa składa się z szyny w kształcie buta wykonanej z PCV oraz dwóch bocznych szyn stabilizujących z zamkniętym zegarem umożliwiającym regulację kątową. Orteza wyposażona jest w wewnętrzną wyściółkę materiałową zapewniającą stały dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz bardzo dobre odprowadzenie ciepła i wilgoci. Całość została wyposażona w system pasów obwodowych do indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z antypoślizgowym materiałem, która umożliwia pacjentowi chód fizjologiczny.

2. Zastosowanie

Orteza stopowo-goleniowa należy do wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie skokowym i poprawy czynności funkcjonalnych. Orteza stabilizuje stopę i podudzie w położeniu zgięcia podeszwowego lub grzbietowego w stanach pourazowych w obrębie stopy i podudzia. Ortezę stopowo-goleniową należy stosować w przypadku: leczenia pooperacyjnego, skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych, naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa, złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i dolnego, jako alternatywę do unieruchomienia gipsowego.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku: otarć naskórka, egzem skórnych, ran oraz innych uszkodzeń skóry, po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających

Uwaga! W przypadku żylakowatości podudzi stosowanie aparatu jest ograniczone. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu


ustalenia czy wyrób może zostać użyty w przypadku stosowania podkolanówek lub pończoch przeciw żylakowych.


3. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

4. Sposób zakładania (w pozycji siedzącej z nogą lekko zgiętą w stawie kolanowym)

- W pierwszej kolejności należy rozpiąć pasy obwodowe oraz odpiąć i wyciągnąć wewnętrzną wyściółkę.
- Wyściółkę należy założyć na nogę, a w razie konieczności zastosować dodatkowe poduszki wypełniające znajdujące się w zestawie. Materiał wyściółki należy zapiąć a następnie włożyć do buta i zapiąć pasy obwodowe na rzep.
- Ustawienie kąta zgięcia. Przesunąć okienko zegara w odpowiednie miejsce (zgięcie podeszwowe/*plantar flexion* lub zgięcie grzbietowe/*dorsi flexion*), a następnie otworzyć je. Wpiąć pierwszy klin ustawiając wymaganą wartość kątową w obszarze z ikoną „kłódki”, a drugi klin w otworze o tej samej wartości kątowej ale w obszarze bez ikony „kłódki”. W taki sam sposób ustawić drugi zegar.

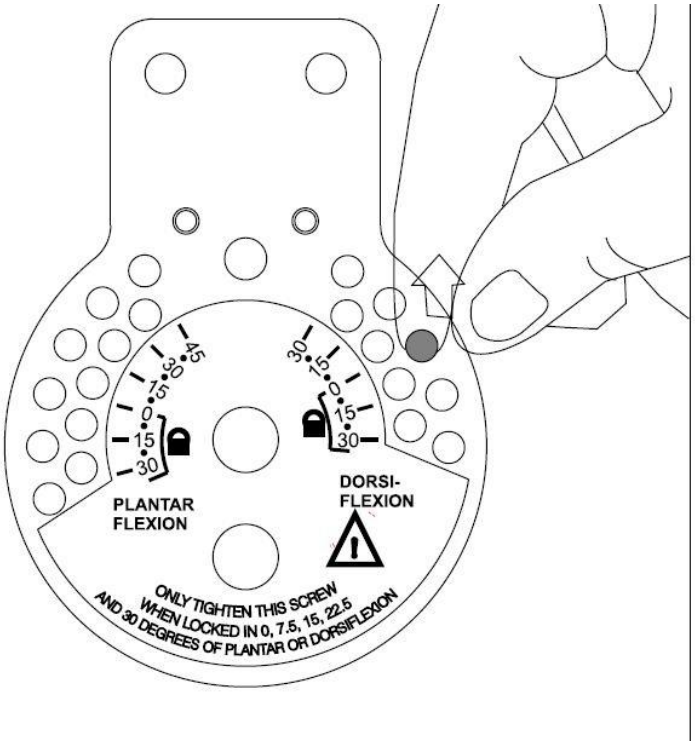

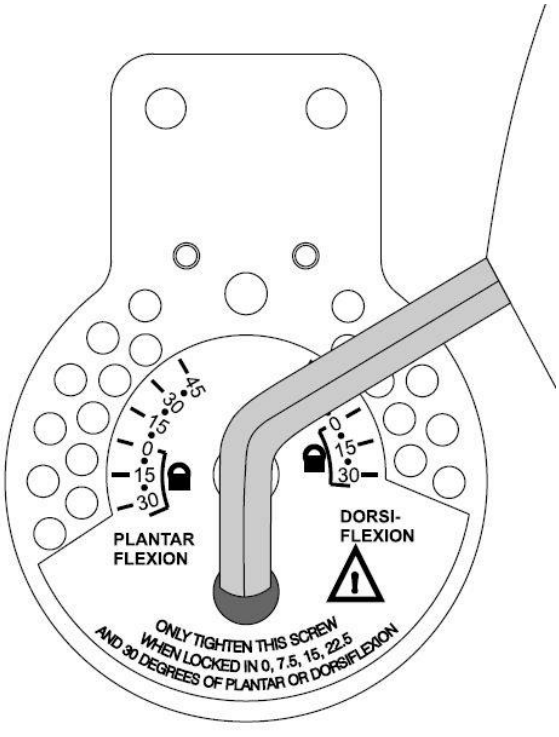

- Znak kropki pomiędzy wartościami liczbowymi oznacza ustawienie wartości pośredniej (przykład: ustawienie znaku kropki pomiędzy 15°, a 30° oznacza ustawienie wartości kątowej 22,5°),
- Jeżeli chcemy ustawić naturalną pozycję stopy, oba kliny na zegarze należy wpiąć ustawiając wartość 0°
- Śruba w zegarze służy wyłącznie do zablokowania wartości kąta. Należy ją dokręcić, jeżeli chcemy zablokować ustawienia zegara w pozycji: 0°, 7,5°, 15°, 22,5° lub 30° (klucz do regulacji w zestawie)
- Możliwe ustawienia kąta zgięcia
  - Zgięcie podeszwowe/Plantar Flexion 0°; 7,5°; 15°; 22,5°; 30°; 37,5°; 45°
  - Zgięcie grzbietowe/Dorsi Flexion 0°; 7,5°; 15°; 22,5°; 30°

Tabela rozmiarowa (rozmiar buta):

S	37-38
M	39-43
L	44-46

5. Konserwacja

Prać ręcznie lub mechanicznie w temp. do 30°C, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie. Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła. Szynę z PCV należy czyścić lekko nasączoną gąbką z mydłem.

6. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej.
Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii		Data produkcji
SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Polska

UNITED SURGICAL
Fort Wayne, IN 46803,
2235 Pensylvania St., USA

EC REP

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15, 2513 BH,
The Hague, Holandia

CE MD

09/2022(IV)