

Gucio

WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OPIS I PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Wózek inwalidzki elektryczny jest sprzętem pomocniczym, który może zastąpić typowy wózek inwalidzki, wspomagając mobilność osób niepełnosprawnych.

Wózek inwalidzki elektryczny przeznaczony jest dla osób:

- niepełnosprawnych, mających problem z samodzielnym poruszaniem się,
- z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi,
- z chorobami serca i układu krążenia,
- z osłabieniem organizmu spowodowanym zaawansowanym wiekiem.

Przeciwskazania:

- zaburzenia psychiczne lub postrzegania utrudniające użytkownikowi skupienie,
- amputacja kończyn górnych (ramion) uniemożliwiająca samodzielną jazdę,
- usztywnienia stawów w obu ramionach,
- problemy z utrzymaniem pozycji siedzącej,
- zaburzenia percepcji wzrokowej lub ślepota.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem wózka.
- Nie należy używać wózka przed wykonaniem wszystkich czynności dotyczących rozłożenia i montażu.
- Nie zaleca się używania wózka przez osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne korzystanie.
- Maksymalne obciążenie wózka nie może przekroczyć 130 kg.
- Wózek może być użytkowany tylko przez 1 osobę.
- Podczas jazdy należy trzymać stopy na podnóżku, a przedramiona na podłokietnikach.
- Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić uwagę na stan akumulatora.
- Wózka elektrycznego należy używać tylko na płaskich podłożach i niewielkich wzniesieniach. Nie należy pokonywać wzniesień większych niż 6 stopni.
- Nie należy prowadzić wózka na prędkości maksymalnej podczas zjeżdżania z górki lub wjeżdżania pod górkę.
- Nie należy prowadzić wózka na bardzo miękkich lub śliskich powierzchniach jak błoto, piasek itp.
- Nie zaleca się prowadzić wózka bokiem do mocno nachylonego terenu, gdyż grozi to jego wywróceniem.
- Nie należy dokładać dodatkowych obciążeń w postaci przyczep itd.
- Nie należy dokonywać samodzielnych napraw czy przeróbek konstrukcyjnych. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych pochodzących od Producenta.

- Nie należy wsiadać i zsiadać z wózka, kiedy włączony jest moduł sterowania.
- Nie zaleca się używania wózka bez kół antywywrotnych.
- Nie należy wsiadać i zsiadać z wózka bez asekuracji osoby trzeciej, gdy włączony jest tryb manualny.
- Nie należy wychylać się zbytnio z wózka w celu podniesienia przedmiotu leżącego z przodu, z boku lub z tyłu wózka, ponieważ grozi to przewróceniem wózka.
- Nie należy stawać na podnóżek, ponieważ grozi to przewróceniem wózka.
- Należy unikać gwałtownych zmian kierunku na wzniesieniu.
- Przed wykonaniem skrętu oraz podczas zjazdu należy zmniejszyć prędkość.
- Należy upewnić się, że koła są prawidłowo zamontowane.
- Należy delikatnie poruszać joystickiem i nie wykonywać nim gwałtownych ruchów.
- Podczas deszczu wózek powinien być przechowywany w zadaszonych pomieszczeniach.
- Przed włączeniem zasilania na module sterowania należy upewnić się, że dźwignia przełączająca tryb jazdy prawego i lewego silnika znajduje się w pozycji trybu elektrycznego.
- Nie należy zmieniać trybu jazdy na tryb manualny, gdy wózek jest w ruchu.
- Surowo zabrania się pokonywania miejsc z poziomymi szczelinami, takich jak kanały ściekowe.
- Jeżeli planowane jest dłuższe nieużywanie wózka, zaleca się odłączenie akumulatora.
- Nie wolno używać wózka na drodze, ponieważ może być to przyczyną wypadku drogowego.
- Wózek nie powinien być przechowywany w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.

INCYDENTY ZWIĄZANY Z WYROBEM MEDYCZNYM

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

3. INFORMACJE OGÓLNE



Nie wolno obsługiwać wózka bez wcześniejszego przeczytania i zrozumienia instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi zawiera niezbędne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa, konserwacji oraz użytkowania pojazdu.



Nie wolno modyfikować, dodawać lub demontować części wózka oraz dezaktywować jego funkcji samodzielnie. W celu wykonania napraw skontaktować się z autoryzowanym serwisem importera.

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA PRZED JAZDĄ

Przed każdym użyciem wózka należy przeprowadzić kontrolę elementów ulegających zużyciu, takich jak hamulce, koła itp.

OGRANICZENIA WAGOWE



Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia wózka (**130 kg**), ponieważ może to spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
Nie wolno przewozić innych pasażerów na wózku, gdyż może to prowadzić do utraty stabilności wózka i/lub wypadku.

JAZDA PO POCHYŁOŚCIACH



Nie należy prowadzić wózka w poprzek pochyłości ani poruszać się po niej ukośnie w górę lub w dół.
Nie wolno wjeżdżać ani zjeżdżać z potencjalnie niebezpiecznych pochyłości (np. powierzchni pokrytych śniegiem, lodem, skoszoną trawą lub mokrymi liśćmi).

JAZDA PO RÓŻNYCH TYPACH NAWIERZCHNI

Konstrukcja wózka umożliwia jazdę po różnych rodzajach nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (beton, asfalt, podłoga itp.). Należy pamiętać o kilku zasadach, aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia wózka:

- Należy zmniejszyć prędkość podczas jazdy po nierównych nawierzchniach.
- Unikać jazdy po trawie lub błocie oraz luźno ubitego żwiru lub piasku.
- Nie wolno jeździć po śliskich powierzchniach, takich jak lód, gdyż może to doprowadzić do wypadku.
- Nie wolno poruszać się po nawierzchniach niestabilnych.
- Należy unikać dziur i rowów.
- Zabronione jest poruszać się wózkiem po drogach publicznych, ponieważ może to skutkować wypadkiem drogowym. Należy jeździć wyłącznie po chodnikach lub wyznaczonych ścieżkach rowerowych.

SCHODY I SCHODY RUCHOME

Wózek nie jest przeznaczony do wjazdu ani zjazdu po schodach oraz schodach ruchomych. Do transportu należy używać windy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE WARUNKÓW POGODOWYCH

Nie wolno narażać wózka na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak skrajnie wysokie lub niskie temperatury, deszcz czy śnieg. W przypadku znalezienia się w takich warunkach podczas prowadzenia należy poszukać schronienia i przeczekać przed kontynuowaniem jazdy. W przypadku deszczu wózek powinien zostać osuszony przed dalszą jazdą lub jego przechowywaniem lub ładowaniem.



Temperatura powierzchni wózka może wzrosnąć w wyniku narażenia na zewnętrzne źródła ciepła (np. promieniowanie słoneczne).

OCHRONA AKUMULATORA



Należy zawsze chronić akumulator przed zamarznięciem. **Nie należy** ładować akumulatora, który uległ zamarznięciu. W przypadku uszkodzenia lub pęknięcia akumulatora należy natychmiast skontaktować się z serwisem importera.



Nie wolno zmieniać żadnych połączeń obwodów elektrycznych. **Wszelkie samodzielne naprawy są zabronione i mogą skutkować uszkodzeniami nieobjętymi gwarancją.**

SYMBOL	ZNACZENIE
	Zabezpieczenia typu B
	**Uwaga!** Należy przeczytać instrukcję
	**Zabronione!** Wykonywanie czynności zabronionych może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie sprzętu. Szkody powstałe w wyniku wykonywania czynności zabronionych nie są objęte gwarancją.
	**Obowiązkowe!** Czynności te muszą zostać wykonane przed użyciem. Niewykonanie tych czynności przez użytkownika może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem sprzętu.
IP44	Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych za pomocą narzędzia, ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy 1 mm i większej oraz ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.
	Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.
	Zachowuj szczególną ostrożność wobec pieszych podczas jazdy
	**Nie** usuwaj żadnych części ani etykiet ostrzegawczych
	**Nie** wkładaj palców ani kończyn pod osłony ani pomiędzy ruchome części wózka – może grozić to uszkodzeniem kończyn
	**Nie** przeciążaj wózka. Maksymalne dopuszczalne obciążenie nie może przekraczać **130 kg**.

	**Nie** używaj wózka na schodach.
	**Nie** używaj wózka w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak intensywny deszcz, bardzo wysoka wilgotność, oblodzenie itp.
	**Uwaga!** Temperatura powierzchni wózka może być wysoka.
	W przypadku wypadku i/lub uszkodzenia części korzystaj wyłącznie z autoryzowanego serwisu importera.
	Akumulator zawiera substancje żrące. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
	Przed jazdą upewnij się, że oparcie znajduje się w pozycji pionowej
	Używaj wyłącznie bezobsługowych, szczelnych akumulatorów litowych.
	Trzymaj narzędzia i inne metalowe przedmioty z dala od biegunów akumulatora. Kontakt z metalem może spowodować porażenie prądem.
 	Utylizacja i recykling. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania odpadów.
	Ładowarka akumulatora przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego

	Materiały łatwopalne Nie wystawiaj na działanie otwartego ognia.
	**MR Unsafe** Niebezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego
	W przypadku zaburzeń psychicznych lub fizycznych przed użyciem wózka skonsultuj się ze specjalistą
	Zachowuj prawidłową pozycję podczas jazdy
	Zachowuj koncentrację podczas jazdy
	Delikatne
	Chroń przed wilgocią

4. INFORMACJE PRODUKTOWE

1. ELEMENTY SKŁADOWE



1. Uchwyt
2. Oparcie z tapicerką
3. Latarka
4. Przycisk uchylania podłokietnika
5. Moduł sterujący
6. Podłokietnik
7. Siedzisko z poduszką i pasem bezpieczeństwa
8. Tylne koło pełne 12”
9. Przednie koło obrotowe 8”
10. Bateria litowa
11. Składany podnóżek

12. Moduł sterujący dla osoby asystującej
13. Kieszeń na drobiazgi
14. Klamra składania
15. Silniki i dźwignie zmiany trybu pracy
16. Miejsce montażu kółek antywywrotnych



Wózek po złożeniu



2. CECHY PRODUKTU

- Składana, aluminiowa rama
- Pełne koła tylne o średnicy 12” oraz przednie obrotowe o średnicy 8”
- Paroprzepuszczalna tapicerka w zestawie
- Łatwy w obsłudze moduł sterujący
- Amortyzacja umożliwiająca lepszą stabilizację podczas jazdy
- Odblask na kieszeni dla lepszej widoczności podczas jazdy w nocy
- Moduł sterujący dla osoby asystującej w zestawie
- Bezpieczny i niezawodny hamulec elektromagnetyczny
- Pas bezpieczeństwa i koła antywywrotne
- Uchylane podłokietniki i podnóżek
- W pełni zamknięty, bezobsługowy akumulator litowy
- Kieszeń na drobiazgi z tyłu oparcia
- Dwa tryby pracy: elektryczny tryb jazdy i tryb manualny

3. PARAMETRY TECHNICZNE



Urządzenia nie można stosować w otoczeniu łatwopalnych gazów zmieszanych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.

Uwaga! Niektóre parametry mogą się różnić w zależności od wagi użytkownika, warunków drogowych i zużycia akumulatora.

Kod produktu	Gucio
Typ	do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
Wysokość całkowita	94 cm
Szerokość całkowita	61 cm
Długość całkowita	97 cm
Wysokość siedziska od podłoża	50 cm
Wysokość oparcia od siedziska	50 cm
Wymiary poduszki	43 x 43 x 3 cm
Wymiary po złożeniu	58 x 44,5 x 80 cm
Maks. obciążenie	130 kg
Waga baterii	2,50 kg
Bateria	litowa, 24 [V] x 12 [Ah]
Czas ładowania baterii	6-8 godzin

Waga własna wózka	19,00 kg
Koła	przednie: obrotowe, pełne 8” tylne: pełne 12”
Maks. prędkość	≤ 6 [km/h]
Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej (przy prędkości maks.)	≤0,8 [m]
Zasięg	20 [km]
Maks. bezpieczne nachylenie	≤9°
Minimalny promień skrętu	1,2 [m]
Wymagania elektryczne	typ B
Stopień ochrony silnika	IP44
Moc silników	2 x 300 [W]
Dostępna kolorystyka ramy	czarny

4. ROZPAKOWYWANIE I INSTALACJA

- **Rozkładanie:** Wyjąć wózek z opakowania. Przytrzymać siedzisko jedną ręką, a drugą oparcie i powoli rozłożyć wózek do momentu zaskoczenia (charakterystyczny dźwięk kliknięcia klamry zabezpieczającej). Opuść podnóżek.
- **Składanie:** Aby złożyć wózek należy nacisnąć dolną część klamry składania zlokalizowaną z tyłu ramy i powoli złożyć wózek przesuwając oparcie do przodu. Następnie złożyć podnóżek.
  Uwaga! Przed złożeniem wózka do transportu należy odłączyć lub wyjąć baterię.
- **Regulacja położenia modułu sterowania:** regulacji należy dokonywać siedząc w wózku. W pierwszej kolejności należy poluzować śrubę mocującą i przesunąć wspornik mocujący moduł sterowania do przodu lub do tyłu w celu ustawienia odpowiedniej pozycji, a następnie dokręcić śrubę.
- **Odchylanie podłokietników:** wózek posiada możliwość odchylenia podłokietników. W tym celu należy nacisnąć przycisk znajdujący się po zewnętrznej stronie wózka i powoli unieść ramę. Aby zamocować podłokietniki z powrotem, należy opuścić ramę do momentu zaskoczenia pinu.
- **Montaż kółek antywywrotnych:** aby zamontować kółka należy włożyć je w otwory montażowe na ramie i zabezpieczyć za pomocą klipsa zabezpieczającego.
- **Wyciąganie akumulatora:** aby wyjąć akumulator należy najpierw odłączyć ją od okablowania (kabel z czerwoną wtyczką) a następnie nacisnąć klips blokujący pod baterią i wysunąć ją. Powtórzyć czynności w celu ponownego zamontowania baterii.

5. ZASADY UŻYTKOWANIA

A. FUNKCJE MODUŁU STEROWANIA



A. Wskaźnik poziomu baterii
B. Przycisk włącz/wyłącz
C. Klakson
D. Wskaźnik poziomu prędkości
E. Regulacja szybkości
F. Przycisk wyciszania
G. Joystick
H. Lampka ze slotem USB

FUNKCJE MODUŁU STEROWANIA DLA OSOBY ASYSTUJĄCEJ




1. Joystick
2. Regulacja szybkości
3. Klakson
4. Przycisk włącz/wyłącz

Funkcje	
Joystick	Służy do kontroli prędkości i kierunku jazdy (przód, tył, skręt). Kierunek jazdy zależy od kierunku, w którym popychany jest joystick. Im dalej joystick jest odchylony od środka panelu tym większa prędkość wózka. Wózek automatycznie wytraci prędkość, kiedy zwolni się joystick.
Wskaźnik prędkości 5 biegów	1 – najwolniejszy, 5 – najszybszy.
Włączanie/wyłączanie asystenta głosowego	Przytrzymać przycisk przed ponad 5 sekund, aby wyłączyć asystenta głosowego (dostępny tylko w wersji angielskiej).
Funkcja ostrzegawcza	Przytrzymać przycisk, aby aktywować funkcję ostrzegawczą. Nacisnąć dowolny przycisk w celu zatrzymania funkcji.
Przebyty dystans	Pokazuje przebyty dystans, podczas gdy wózek jest włączony. Dystans resetuje się po wyłączeniu modułu sterowania.

B. ZMIANA TRYBU Z ELEKTRYCZNEGO NA MANUALNY

Aby używać wózka w trybie elektrycznym należy przesunąć dźwignię prawego i lewego silnika w górę. Aby używać wózka w trybie manualnym należy przesunąć dźwignię obu silników w dół.

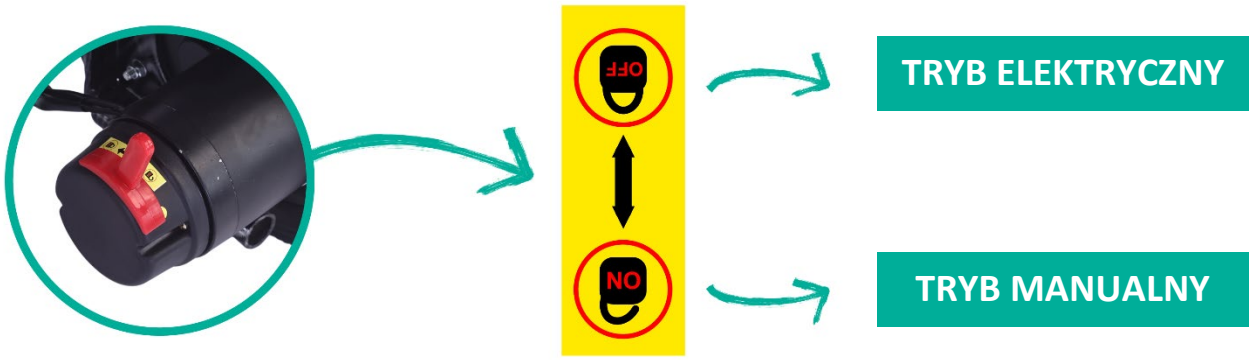

C. ŁADOWARKA

- Zestaw zawiera ładowarkę z wyjściem dla akumulatora.
- Czas ładowania baterii to ok. 6-8 godzin.
- Bateria może być ładowana bezpośrednim połączeniem lub poprzez slot w module sterowania.
- **Ważne:** ładujące baterię przez gniazdo pod modułem sterowania należy najpierw wyłączyć moduł.
- **Wskaźnik LED na ładowarce:**

A. **Zielona lampka LED –** bateria nie jest podłączona do ładowarki lub jest w pełni naładowana.

B. **Czerwona lampka LED** – bateria ładuje się/nie skończyła się ładować.

- Należy upewnić się, że podłączenie obwodu ładowania jest poprawne.
- Nie należy modyfikować podłączenia obwodu ładowania.

- Aby uniknąć przepalenia lub pożaru, nie należy rozłączać obwodu w czasie trwania ładowania.
- Aby sprawdzić poziom naładowania baterii należy odpiąć ładowarkę od modułu.

D. SPOSÓB UŻYCIA

- Aby rozpocząć użytkowanie, należy ustawić dźwignię w pozycji odpowiedniej dla wybranego trybu.
  Uwaga! Nie należy przełączać trybów jazdy na wzniesieniu.
- Należy wcisnąć przycisk zasilający na module sterowania, aby sprawdzić poprawność działania hamulców. Jeżeli wózka nie da się łatwo popchnąć oznacza to, że działa hamulec elektryczny. W innym przypadku należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
- Należy odchylić płytę podnóżka, usiąść na wózek, a następnie opuścić ponownie
  Uwaga! Nie należy wykorzystywać podnóżka do podpierania się w czasie czynności wsiadania i zsiadania, ze względu na ryzyko przechylenia się wózka i upadku.
- Należy usiąść na wózku i włączyć przycisk zasilający moduł sterowania. Zapali się dioda. Joystick powinien znajdować się w neutralnej pozycji.
- Podczas pierwszego użycia należy zachować szczególną ostrożność. Za pomocą joysticka można kontrolować kierunek jazdy oraz prędkość. Zwolnienie hamulca elektro-magnetycznego następuje po lekkim popchnięciu joysticka w kierunku jazdy, co wprawi wózek w ruch. Poprzez zwiększenie odchylenia joysticka od pozycji neutralnej wózek przyśpiesza a poprzez zmniejszenie – wózek zwalnia.
- Aby zatrzymać wózek, należy puścić joystick. Po gwałtownym puszczeniu joysticka lub wciśnięciu przycisku wyłączającego podczas jazdy, wózek zatrzyma się gwałtownie.
- Za pomocą przycisku regulacji prędkości na module sterowania należy dostosować prędkość maksymalną do stanu fizycznego użytkownika i warunków drogowych.
- Wózka należy używać na płaskich powierzchniach. Podczas jazdy po błotnistych lub nierównych nawierzchniach może dojść do uszkodzenia układu sterowania.

6. INFORMACJE NA TEMAT KONSERWACJI WÓZKA

1. Czyszczenie i konserwacja

- Zaleca się regularny przegląd konstrukcji wózka oraz jego elementów (opon, ramy, okablowania, modułu sterowania, hamulców itd.).
- Zużyte części należy wymienić (w tym celu skontaktuj się ze Sprzedawcą).

2. Konserwacja i czyszczenie akumulatora:

1) Należy zwrócić uwagę na sygnalizację diodową na module sterowania. Jeżeli pojemność akumulatora jest bardzo niska, należy natychmiast naładować akumulator, aby uniknąć spadku napięcia mającego wpływ na jego żywotność.
2) Jeżeli wózek przez dłuższy czas nie będzie użytkowany, akumulator należy ładować co najmniej raz w miesiącu.
3) Akumulator ma określoną żywotność. Jeżeli akumulator zużyje się, należy wymienić go na nowy.

4) Akumulator powinno się utrzymywać w czystości, z dala od zasięgu dzieci. Należy unikać narażania akumulatora na uderzenia.
5) Regularne ładowanie akumulatora zapewnia jego dłuższą żywotność.
6) Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.

3. Transport i przechowywanie

A. TRANSPORT

- Podczas transportu należy zachować ostrożność. Nie należy rzucać, odwracać i wywierać dużego nacisku na produkt.
- Składanie wózka: sprawdź punkt ,,Rozpakowywanie i instalacja".

B. PRZECHOWYWANIE

Wózek należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy unikać: wysokich temperatur oraz jej nagłych zmian, kontaktu z kwasami, zasadami oraz korozyjnymi chemikaliami.

C. WARUNKI ATMOSFERYCZNE DO PRZECHOWYWANIA

Temperatura: -40[°C] ~+55[°C]
Wilgotność powietrza: ≤80%
Ciśnienie atmosferyczne: 86~106 kPA

4. Usuwanie usterek

- W przypadku wystąpienia problemu, moduł sterowania włączy alarm w postaci dźwięków i ostrzeżenia na ekranie. Liczba sygnałów dźwiękowych informuje o rodzaju problemu.

Moduł sterujący	Problem	Możliwe rozwiązanie
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci się, a wózek wydaje siedem dźwięków	1. Joystick nie znajduje się na środku. 2. Sprawdzić, czy joystick jest podłączony. 3. Odłączyć zasilanie od modułu sterującego. Podłączyć je ponownie i sprawdzić, czy moduł sterujący działa normalnie. 4. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktować się ze sprzedawcą.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci się, a wózek wydaje dwa dźwięki	1. Słabe połączenie kabli lewego silnika. 2. Sprawdzić, czy lewy przewód silnika jest w dobrym stanie, nie jest poluzowany lub odłączony. 3. Zamienić lewy i prawy przewód silnika. Po zamianie przewodów alarm zadzwoni 4 razy, wskazując usterkę lewego silnika / 2 razy, wskazując usterkę sterownika. Skontaktować się ze sprzedawcą.

	Wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci się, a wózek wydaje trzy dźwięki	1. Słabe połączenie kabla lewego hamulca. 2. Sprawdzić, czy lewa dźwignia hamulca jest przełączona na tryb elektryczny. 3. Sprawdzić, czy hamulec jest w dobrym stanie, czy nie jest poluzowany lub odłączony. 4. Zamień przewody lewego i prawego silnika. Po zamianie alarm zadzwoni 5 razy, wskazując awarię lewego hamulca / 3 razy, wskazując awarię sterownika. Skontaktować się ze sprzedawcą.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii i prędkości świeci się, a wózek wydaje trzy dźwięki	1. Błąd konfiguracji hamulca 2. Sprawdzić, czy lewa i prawa dźwignia hamulca są ustawione na trybie elektrycznym. 3. Skontaktować się ze sprzedawcą.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci się, a wózek wydaje cztery dźwięki	1. Słabe połączenie kabli prawego silnika. 2. Sprawdzić, czy prawy przewód silnika jest w dobrym stanie, nie jest poluzowany lub odłączony. 3. Zamienić lewy i prawy przewód silnika. Po zamianie przewodów alarm zadzwoni 4 razy, wskazując usterkę lewego silnika / 2 razy, wskazując usterkę sterownika. Skontaktować się ze sprzedawcą.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci się, a wózek wydaje pięć dźwięków	1. Słabe połączenie kabla prawego hamulca. 2. Sprawdzić, czy lewa dźwignia hamulca jest przełączona na tryb elektryczny. 3. Sprawdzić, czy hamulec jest w dobrym stanie, czy nie jest poluzowany lub odłączony. 4. Zamień przewody lewego i prawego silnika. Po zamianie alarm zadzwoni 5 razy, wskazując awarię lewego hamulca / 3 razy, wskazując awarię sterownika. Skontaktować się ze sprzedawcą.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci się, a wózek wydaje siedem dźwięków	Skontaktować się ze sprzedawcą w celu zbadania przyczyny problemu.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci na czerwono	1. Problem z poziomem napięcia akumulatora. 2. Bateria wymaga natychmiastowego naładowania. 3. Wadliwe działanie kontrolera. Skontaktować się ze sprzedawcą.

5. Dane dotyczące gwarancji

- Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę). Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym. Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.
- **<u>Gwarancją nie są objęte:</u>**
  - **części zużywalne:** tapicerka, opona, podłokietnik, akumulator,
  - **szkody powstałe w wyniku:** samodzielnych napraw, zmian w produkcie, upuszczenia, transportu, niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji, katastrof naturalnych (pożary, trzęsienia ziemi, powodzie).

Hebei Dansong Medical Equipment Co., LTD.
Liwa Village, Nanwucun Town, Jizhou District, Hengshui City, China

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan des IJssel, The Neatherlands

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

TIMAGO.COM

+48 33 499 50 00
info@timago.com

MD CE

10/2026 (I)